

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

SWASH® КЪРПИ ЗА КЪПАНЕ 8 броя

Продуктов код: A04028-8 (UDI-DI: 08717127936854) / B04028-8 (UDI-DI: 08717127937134) / P04028-8 (UDI-DI: 08720663610690)


Потребител: Медицински специалист или доставчик на здравни услуги

Предназначение:

Кърпите за къпане Swash® са предназначени за цялостно почистване на тялото на пациенти с инконтиненция и/или лежащо болни, като мярка за предотвратяване на инфекции.

Спомагателни материали:

- Ръкавици за еднократна употреба
- Кошче за боклук
- Кърпички (ако е необходимо)
- Хигиенни средства за инконтиненция (ако е необходимо)
- Чисти дрехи и/или постелно бельо (ако е необходимо)
- Микровълнова фурна (ако е необходимо)

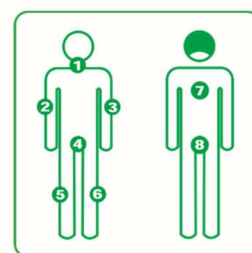

Инструкции за употреба:

Използвайте по 1 кърпа за всяка част от тялото (вижте пиктограмата). По желание опаковката може да се затопли в микровълнова фурна. Проверете температурата преди употреба. Използвайте всеки пакет само за един човек. Вижте по-долу за подробната процедура.

Подробна процедура:

Кърпите за къпане Swash® могат да се съхраняват централно в болничното отделение или до леглото на пациента и да се използват както затоплени, така и със стайна температура. В зависимост от подвижността на пациента е възможно да се работи и в последователност, различна от посочената, при условие че всяка част от тялото (вижте пиктограмата по-горе) се измива с отделна кърпа за къпане. Подсушаване не е необходимо. Кожата изсъхва сама при изпаряването на лосиона. Ако е необходимо, подсушете кожните гънки чрез попиване с кърпичка.

- 1 Ако предпочитате, загрейте кърпите за къпане Swash®. Препоръчителната температура се постига чрез загреване на опаковката на максимум 800 вата в микровълнова фурна за 30 секунди.
- 2 Обяснете на пациента какво ще правите и поддържайте контакт по време на цялата процедура.
- 3 Преди да започнете, измийте ръцете си и сложете чифт ръкавици за еднократна употреба.
- 4 Помолете пациента да легне, с възглавница под главата. Помолете го да сваля дрехите си; ако е необходимо, помогнете му. Отметнете завивката до долната част на тялото.
- 5 Отворете опаковката, като отлепите капачето и проверете температурата на кърпата за къпане. Забележка: ръкавиците за еднократна употреба притъпяват усета Ви за топлина.
- 6 **Кърпа за къпане 1:** Започнете с китката или горната част на ръката на пациента. Попитайте пациента дали температурата му е приятна. Ако да, продължете с почистването. Ако не, изчакайте, докато кърпата се охлади до температура, приятна за пациента. Измийте лицето, шията и гърдите. След почистване изхвърлете кърпата.
- 7 **Кърпа за къпане 2:** Измийте ръката на пациента и подмишницата, които са по-близо до вас, като започнете с ръката. След почистването изхвърлете кърпата.
- 8 **Кърпа за къпане 3:** Измийте другата ръка и подмишница на пациента, като започнете с

ръката. След почистването изхвърлете кърпата.

- 9 **Кърпа за къпане 4:** Ако пациентът е с памперс, отстранете го и измийте гениталиите. След почистването изхвърлете кърпата.
- 10 **Кърпа за къпане 5:** Измийте крака, който е по-близо до Вас, от глезена до бедрото, а после и стъпалото. След почистването изхвърлете кърпата.
- 11 **Кърпа за къпане 6:** Измийте другия крак от глезена до бедрото, а после и стъпалото. След почистването изхвърлете кърпата.
- 12 **Кърпа за къпане 7:** Помолете пациента да се обърне на едната си страна и му помогнете, ако е необходимо. Измийте гърба на пациента. След почистването изхвърлете кърпата.
- 13 **Кърпа за къпане 8:** Измийте задните части и областта около опашната кост на пациента. Ако са необходими допълнителни грижи, използвайте подходящи продукти за инконтиненция. След почистването изхвърлете кърпата.
- 14 Облечете пациента и го поставете в желаната позиция.
- 15 Изхвърлете празната опаковка от Swash® и кърпите в кошчето. НЕ ПУСКАЙТЕ кърпите за къпане в тоалетната!
- 16 Съобщете отзивите на пациента, ако има такива.

ВНИМАНИЕ:

- Неотклонно съблюдавайте състоянието, комфорта и личното пространство на пациента.
- Всяка опаковка е предназначена само за **един** човек. Запазването и повторното използване на отворени опаковки не се препоръчва поради опасност от инфекция.
- Силно препоръчително е да изразходите отворена опаковка в рамките на 48 часа. Ако в опаковката има останали кърпи, моля, запишете датата и часа върху опаковката и използвайте кърпите за същия пациент в рамките на 48 часа, например за освежаване вечер.
- Следвайте предписаната процедура за измиване на тялото и винаги използвайте нова кърпа за измиване на поредната част от тялото, за да намалите риска от кръстосано замърсяване.
- Кърпите служат само за външна употреба.
- Бъдете внимателни, когато миете клепачите.
- Ако затопляте кърпите за къпане Swash®, е важно е да проверите температурата им, преди да ги използвате върху кожата. НЕ използвайте веднага, ако са твърде горещи. Не забравяйте, че носенето на ръкавици за еднократна употреба притъпява усета Ви за топлина. Обърнете специално внимание на температурата при бебета или хора, неспособни да реагират, както и хора с чувствителна кожа.
- **Не изхвърляйте кърпите за къпане в тоалетната. Изхвърлете празната опаковка Swash® и кърпите в кошчето.**

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Ако пациентът откаже използването им
- Ако е известно, че пациентът е чувствителен или алергичен към една или повече от съставките
- Върху увредена кожа и открити рани



ПИКТОГРАМИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА:

	Пределна температура		Използвай до 48 часа след отваряне
	Пази от слънчева светлина		Изхвърли в кошчето за отпадъци
	Пази на сухо		Не разкъсвай
	Не използвай, ако опаковката е повредена и съблюдавай указанията		Съвет за затопляне
	Не използвай повторно		Продуктът не съдържа латекс
	Нестерилно		Произведено в чисти производствени помещения
	Медицинско изделие		Продуктът не съдържа ароматизатори
	СЕ-маркировка		Продуктът съдържа ароматизатори
	Партида		Не изхвърляй в тоалетната
	Производител		Консултирай се с инструкциите за употреба или с електронните инструкции за употреба
	Използвай преди		
	Уникален продуктов идентификатор		

Информацията в този протокол се отнася конкретно до използването на Swash® кърпи за къпане, предназначени за измиване и грижа за лежащо болни пациенти. Допълнителни интервенции и стъпки могат да бъдат добавени към протокола в съответствие с други протоколи и указания във Вашето здравно заведение.

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, the Netherlands
+31 (0)45 209 4000 • manufacturing@arion-group.com • www.arion-group.com