

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

SWASH® ПОЧИСТВАЩИ КЪРПИ 48 и 24 броя

Продуктов код: L05012-48 (UDI-DI: 08717127938216) / M05012-48 (UDI-DI: 08717127938223)
/ M05012-24 (UDI-DI: 08720663610485)


Потребител: Медицински специалист или доставчик на здравни услуги

Предназначение:

Почистващите кърпи Swash® са предназначени за почистване при инконтиненция на пациенти с инконтиненция и/или лежащо болни, като мярка за предотвратяване на инфекции.

Спомагателни материали:

- Ръкавици за еднократна употреба
- Кошче за боклук
- Хигиенни средства за инконтиненция (ако е необходимо)
- Чисти дрехи и/или постелно бельо (ако е необходимо)

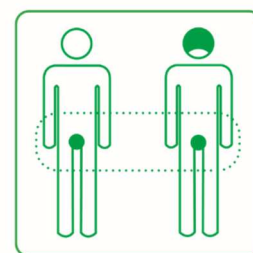

Инструкции за употреба:

Почистете замърсеният участък с достатъчен брой кърпи. Използвайте многократно залепващия се етикет, за да затворите опаковката след всяка употреба. Това гарантира, че кърпите няма да изсъхнат. Използвайте всеки пакет само за един човек. Вижте по-долу за подробната процедура.

Подробна процедура:

Почистващите кърпи Swash® могат да се съхраняват централно в болничното отделение или до леглото на пациента.

1. Преди да започнете, измийте ръцете си и сложете чифт ръкавици за еднократна употреба.
2. Обяснете на пациента какво ще правите и поддържайте контакт по време на цялата процедура.
3. Помолете пациента да легне, с възглавница под главата. Помолете го да свали дрехите си; ако е необходимо, помогнете му.
4. Отстранете мокрия и замърсен памперс.
5. Отворете опаковката на почистващите кърпи Swash® и извадете една кърпа. Измийте гениталиите с почистваща кърпа Swash®. Използвайте толкова кърпи, колкото е необходимо. Кожата изсъхва сама при изпаряването на лосиона. Ако е необходимо, подсушете кожните гънки чрез попиване с хартиена кърпичка.
6. Помолете пациента да се обърне на едната си страна и му помогнете, ако е необходимо. Почистете замърсената област на перинеума (седалището и опашната кост) на пациента с почистваща кърпа Swash®. Използвайте толкова кърпи, колкото е необходимо за отстраняване на всички фекалии и/или урина от кожата. За предпочитане е да поставите използваните почистващи кърпи Swash® в използвания памперс.
7. Проверете областта на перинеума за дерматит, свързан с инконтиненция, и други промени в състоянието на кожата.
8. Ако пациентът е изложен на риск от развитие на дерматит, свързан с инконтиненция, или е наличен дерматит, който трябва да се лекува, продължете с протокола за *перинеални ръкавици Swash®, перинеални кърпи Swash®* или *перинеални+ кърпи Swash®*.
9. Поставете на пациента нов, чист и сух памперс. Сменете спалното бельо, ако е мокро или замърсено, облечете пациента и го поставете в желаната позиция.

- 10 Изхвърлете празната опаковка от почистващи кърпи Swash® и самите кърпи в кошчето. НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ почистващите кърпи Swash® в тоалетната.
- 11 Съобщете за евентуални промени в състоянието на кожата, забелязани след измиването на перинеума.
- 12 Повторете тази процедура след всеки епизод на уринарна или фекална инконтиненция.

ВНИМАНИЕ:

- Неотклонно съблюдавайте състоянието, комфорта и личното пространство на пациента.
- Всяка опаковка е предназначена само за **един** човек. Останалите кърпи могат да се използват за същия пациент.
- Кърпите служат само за външна употреба.
- **Не изхвърляйте почистващите кърпи в тоалетната. Изхвърлете празната опаковка Swash® и кърпите в кошчето.**

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Ако пациентът откаже използването им
- Ако е известно, че пациентът е чувствителен или алергичен към една или повече от съставките
- Върху увредена кожа и открити рани



ПИКТОГРАМИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА:

	Пределна температура		Използвай до 48 часа след отваряне
	Пази от слънчева светлина		Изхвърли в кошчето за отпадъци
	Пази на сухо		Не разкъсвай
	Не използвай, ако опаковката е повредена и съблюдавай указанията		Съвет за затопляне
	Не използвай повторно		Продуктът не съдържа латекс
	Нестерилно		Произведено в чисти производствени помещения
	Медицинско изделие		Продуктът не съдържа ароматизатори
	СЕ-маркировка		Продуктът съдържа ароматизатори
	Партида		Не изхвърляй в тоалетната
	Производител		Консултирай се с инструкциите за употреба или с електронните инструкции за употреба
	Използвай преди		
	Уникален продуктов идентификатор		

Информацията в този протокол се отнася конкретно до използването на почистващи кърпи Swash®, предназначени за почистване на областта на перинеума на пациенти с инконтиненция. Допълнителни интервенции и стъпки могат да бъдат добавени към този протокол в съответствие с други протоколи и указания във Вашето здравно заведение.

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, the Netherlands
+31 (0)45 209 4000 • manufacturing@arion-group.com • www.arion-group.com