



СЕРИЯ ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА ТЕСТОВЕ, ЗА АНАЛИЗ НА УРИНА

UROCOLOR

Сериата UroColor дава възможност за тестване на урината за кръв, билирубин, уробилиноген, кетони, белтък, нитрити, глюкоза, специфично тегло, рН, левкоцити и аскорбинова киселина, в зависимост от избрания вариант на теста.

Резултатите от теста могат да предоставят информация относно състоянието на въглехидратния метаболизъм, бъбречната и чернодробната функция, киселинно-алкалния баланс и инфекция на пикочните пътища.




UroColor Series

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Резултат за 60 секунди
- Лесна интерпретация на резултата
- Широки температурни граници на съхранение (1°C–30°C)
- Цветно кодирана опаковка (брой параметри)
- Аскорбиновата киселина (като 11-ти параметър) позволява определяне на евентуално взаимодействие дължащо се на прием на Витамин С.

ПРОСТА ПРОЦЕДУРА

1 Потопете лентата в урината за 1-2 секунди.

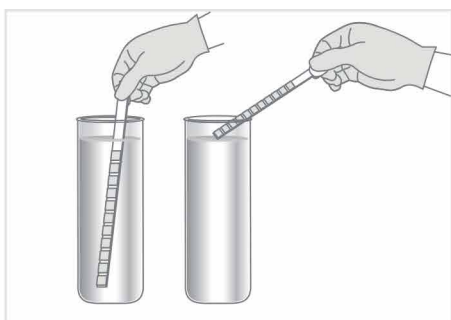

2 Оставете лентата настрана за 1-2 секунди

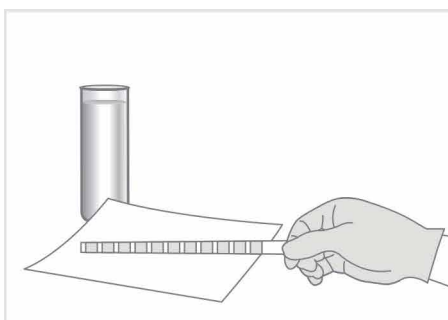

3 Изчакайте 60 секунди преди да отчетете резултата, сравнявайки цветовете на тест лентата със скалата върху опаковката



Повече информация можете да намерите в листовката, придружаваща продукта.

ТАБЛИЦА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПАРАМЕТРИ

КАТ. №	МОДЕЛ	КРЪВ	БИЛИ-РУБИН	УРО-БИЛИНОГЕН	КЕТОНИ	БЕЛТЪК	НИТРИТИ	ГЛЮКОЗА	РН	СПЕЦИФ. ТЕГЛО	ЛЕВКОЦИТИ	АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА
10UK02	UroColor 2					•		•				
10UK02K	UroColor 2K				•			•				
10UK04	UroColor 4	•				•		•	•			
10UK04S	UroColor 4S					•		•	•	•		
10UK10	UroColor 10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10UK11	UroColor 11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Посочените продукти UroColor съдържат 100 броя тест ленти във всяка опаковка.